

KATALOG KOŃCÓWEK

DO ULTRADŹWIĘKOWEJ
CHIRURGII KOSTNEJ



NSK

SURG

CHIRURGIA KOSTNA	S05-S12
SKROBAKI	S13
EKSTRAKCJA	S14
PODNIESIENIE DNA ZATOKI (METODA ZAMKNIĘTA)	S15-S16
PREPARACJA POD IMPLANTY	S17-S20
PODNIESIENIE DNA ZATOKI (METODA ZAMKNIĘTA)	S21-S22*
PODNIESIENIE ZATOKI	S23
ODDZIELENIE BŁONY ŚLIZOWEJ ZATOKI	S24

PERIO

SKALING	S25
PERIODONTOLOGIA	S26
KONTROLA PERIODONTOLOGICZNA	S27-S28


ENDO

ENDODONCJA	S29
ZESTAWY KOŃCÓWEK	S30-S31

*Zdjęcia dostarczone przez Yasuhiro Kizu, D.D.S., Ph.D. OMFC
(ORAL & MAXILLOFACIAL CARE CLINIC YOKOHAMA)

ALMANACH KOŃCÓWEK DO VARIOSURG

- SURG** SURG - program do chirurgii kostnej
- PERIO** PERIO- program do higienizacji
- ENDO** ENDO - program do leczenia kanałowego

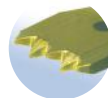

Końcówki zostały zaprojektowane tak, aby chronić tkankę, utrzymać prędkość cięcia i łatwo przecinać kość. Zęby na krawędzi ostrza usprawniają cięcie i redukują zapychanie, co pozwala utrzymać prędkość cięcia.

CHIRURGIA KOSTNA



SKROBAKI



EKSTRAKCYA



PODNIESIENIE DNA ZATOKI



PREPARACJA POD IMPLANTY



PODNIESIENIE ZATOKI



ODDZIELENIE BŁONY ŚLIZOWEJ



SKALING



PERIODONTOLOGIA



PERIODONTOLOGIA-KONTROLA



ENDODONCJA



ZESTAWY KOŃCÓWEK



Sterylizacja w termodezynfektorze



135°C
Sterylizacja
w autoklawie

WYSOKA MOC

Końcówki przeznaczone do wysokiej mocy mogą być używane do ustawień 150% mocy.

VarioSurg 4

Zalety

- Super smukła rękojeść ze światłem LED
- Bogaty asortyment końcówek do szerokiego zakresu zastosowań
- Możliwość połączenia z Surgic Pro2 (mikrosilnikiem implantologicznym) za pomocą bezprzewodowego modułu (Link Module)





Zestaw kompletny

Optic	MODEL	KOD PRODUKTU
●	VarioSurg4 (230V)	Y1500706

Zawiera

- Jednostkę sterującą
- Rękojeść piezoelektryczną LED z 2m przewodem
- Sterownik nożny typ FC-86
- Kasetę do sterylizacji
- Podstawkę na końcówkę
- Wężyki do irygacji (3 szt.) i inne akcesoria
- Zestaw podstawowy H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11, stojak na końcówki)

Zestaw bez sterownika nożnego

Optic	MODEL	KOD PRODUKTU
●	VarioSurg4 (230V) Non FT	Y1500712

Zawiera

- Jednostkę sterującą
- Rękojeść piezoelektryczną z 2m przewodem
- Kasetę do sterylizacji
- Podstawkę na końcówkę
- Wężyki do irygacji (3 szt.) i inne akcesoria
- Zestaw podstawowy H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11, stojak na końcówki)

Specyfikacja (Jednostka sterująca)


- Częstotliwość : 28-32 kHz
- Zasilanie : 240V 50/60 Hz
- Wydajność pompy irygacyjnej : 76 ml / min
- Programy : SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2
- Wymiary : W 245 x D 235 x H 90 mm

CHIRURGIA KOSTNA

Do pobierania kości z okolic podbródka, otworu bródkowego oraz gałęzi żuchwy.
Do ogólnej chirurgii kostnej.

MODEL **SG1**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

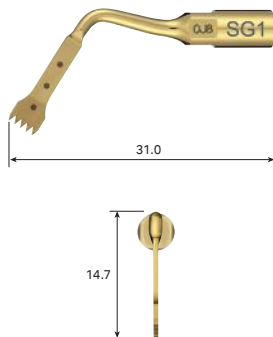

KOD PRODUKTU


Z305101

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 3, 6 i 9 mm od wierzchołka
- Pięć ząbków; grubość 0.6 mm

MODEL **H-SG1**

POZIOM MOCY **SURG** 150%

WYSOKA MOC

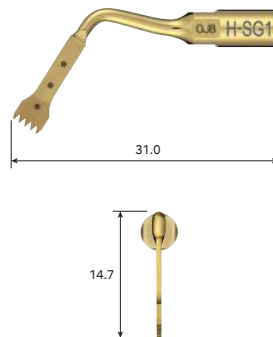

KOD PRODUKTU


Z305151

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 3, 6 i 9 mm od wierzchołka
- Pięć ząbków; grubość 0.6 mm

MODEL **SG1A**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

Do użytku w głębiej położonych obszarach wymagających dłuższej końcówki.

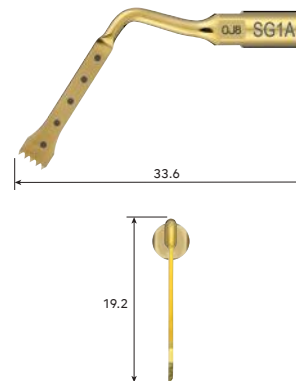

KOD PRODUKTU

Z305138

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 3, 6, 9, 12 i 15 mm od wierzchołka
- Pięć ząbków; grubość 0.6 mm




Pobieranie próbek
z przedniego odcinka żuchwy
SG1, H-SG1, SG1A

Dla przypadków klinicznych wymagających zwiększonego zasięgu końcówek.

CHIRURGIA KOSTNA

MODEL **SG8**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

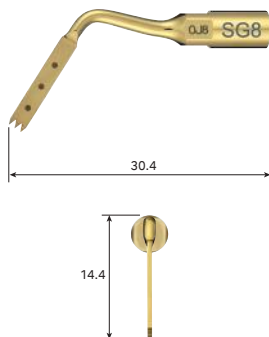

KOD PRODUKTU


Z305109

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 3, 6 i 9 mm od wierzchołka
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm

MODEL **H-SG8**

POZIOM MOCY **SURG** 150%

WYSOKA MOC

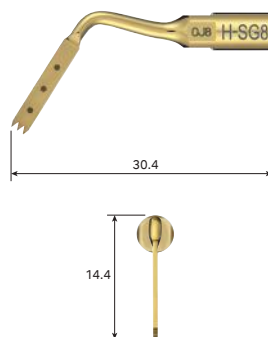

KOD PRODUKTU


Z305155

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 3, 6 i 9 mm od wierzchołka
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm

MODEL **SG8A**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

Do użytku w głębiej położonych obszarach wymagających dłuższej końcówki.

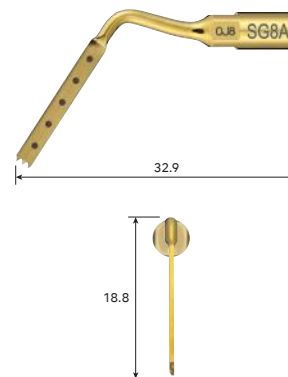

KOD PRODUKTU

Z305139



- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 3, 6, 9, 12 i 15 mm od wierzchołka
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm

CHIRURGIA KOSTNA

Do pobierania kości z gałęzi żuchwy.

MODEL **SG12**

POZIOM MOCY **SURG** 100%

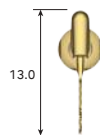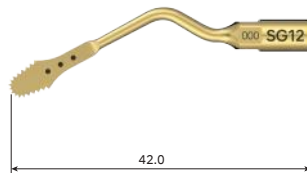



KOD PRODUKTU

ZT02010001

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 6, 8 i 10 mm od wierzchołka
- Osiemnaście ząbków; grubość 0.35 mm

MODEL **SG14R**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

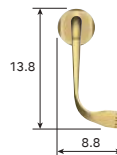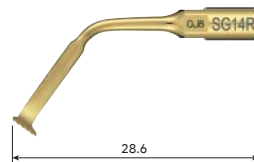



KOD PRODUKTU

Z305122

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Końcówka zagięta prawostronnie pod kątem 90°*
- Pięć ząbków; grubość 0.6 mm

MODEL **SG14L**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

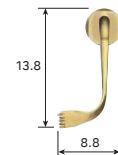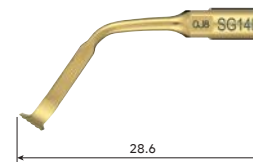

KOD PRODUKTU

Z305123

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Końcówka zagięta lewostronnie pod kątem 90°*
- Pięć ząbków; grubość 0.6 mm



Pobranie kości
z przedniej części trzonu żuchwy

SG14R, SG14L

* Kierunek zagięcia zgodny z widokiem końcówki z przodu

MODEL **H-SG8R** POZIOM MOCY **SURG** 150%

MODEL **H-SG8L** POZIOM MOCY **SURG** 150%

WYSOKA MOC




KOD PRODUKTU

Z305156

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Końcówka zagięta prawostronnie pod kątem 90°
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm

WYSOKA MOC

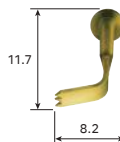

KOD PRODUKTU

Z305157



- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Końcówka zagięta lewostronnie pod kątem 90°
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm

CHIRURGIA KOSTNA

Do wycinania w obszarach ze znacznym nachyleniem lub wystęgami oraz na obszarach, do których trudno jest uzyskać dostęp za pomocą SG1 i innych podstawowych końcówek.

MODEL SG2R

POZIOM MOCY **SURG** 80%

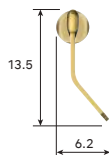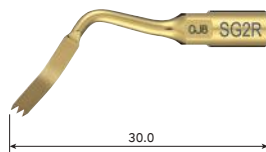

KOD PRODUKTU

Z305102



- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Końcówka zagięta prawostronnie*
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm



Wycięcie guza kostnego
SG2R, SG2L

MODEL SG2L

POZIOM MOCY **SURG** 80%

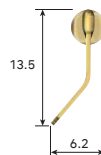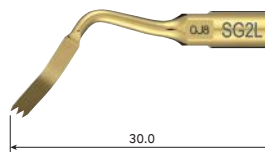

KOD PRODUKTU


Z305103

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Końcówka zagięta lewostronnie*
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm

MODEL SG19

POZIOM MOCY **SURG** 80%

Do cięcia zakrzywionych powierzchni.

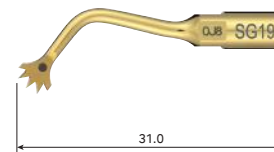

KOD PRODUKTU

Z305135

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znacznik w formie kropki, 3mm od zakończenia
- Pięć ząbków; grubość 0.8 mm



Pobranie kości żuchwy
na etapie podejścia
SG19


* Kierunek zagięcia zgodny z widokiem końcówki z przodu

Do stosowania w miejscach niedostępnych dla regularnych końcówek, szczególnie w tylnych odcinkach żuchwy oraz obszarach zakrzywionych.

MODEL **SG30**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

Do wąskich cięć redukujących utratę kości.
Odpowiednia również do kortykotomii.

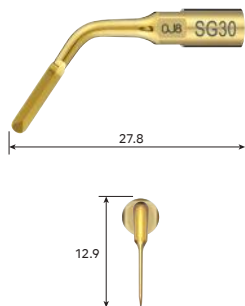

KOD PRODUKTU

Z305137

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Ostre krawędzie
- Grubość 0.6 mm




Nacięcie
wyrostka zębodołowego
w celu pobrania kości

SG30

MODEL **SG58**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

Do usuwania guzów kostnych z tylnej części trzonu żuchwy
oraz powierzchni językowej żuchwy.

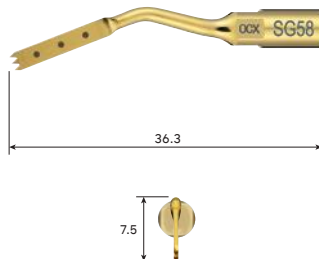

KOD PRODUKTU

Z305141

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 3, 6 i 9 mm od wierzchołka
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm




Wycięcie części
guza kostnego

SG58

MODEL **SG68**

POZIOM MOCY **SURG** 80%


Do usuwania guzów kostnych z tylnej części trzonu żuchwy
oraz powierzchni językowej żuchwy.

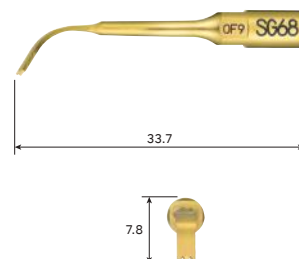

KOD PRODUKTU

Z305143

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki co 2 i 4 mm od wierzchołka (po jednej stronie)
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm

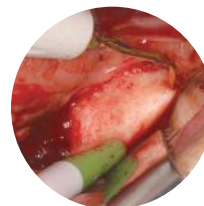

Osteotomia pionowa
SG68


CHIRURGIA KOSTNA (MAKSYMALNY ZASIĘG)

MODEL **M-RE2**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

MODEL **M-ST1**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

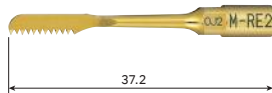


KOD PRODUKTU

Z305715


- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Jedenaście ząbków; grubość 0.6 mm



SSRO gałęzi żuchwy
Poziome linie osteotomii
po stronie przysadkowej.

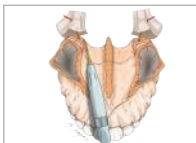


Osteotomia typu Le Fort I
Przycinanie w pobliżu
tętnicy podniebiennej zstępującej.

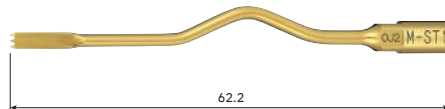

KOD PRODUKTU

Z305713

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm


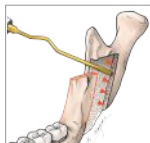


SSRO gałęzi żuchwy
Osteotomia strzałkowa żuchwy
(rozszczepienie).



CHIRURGIA KOSTNA (MAKSYMALNY ZASIEG)


MODEL **M-OC1R** POZIOM MOCY **SURG** 80%

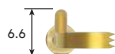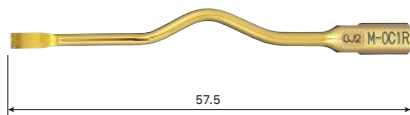

KOD PRODUKTU


Z305709

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 2 mm od wierzchołka
- Końcówka zagięta prawostronnie*
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm

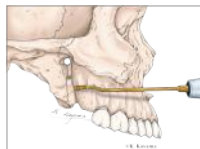

Osteotomia typu Le Fort I
Preparacja połączenia
skrzydłowo-szczękowego.

MODEL **M-OC1L** POZIOM MOCY **SURG** 80%

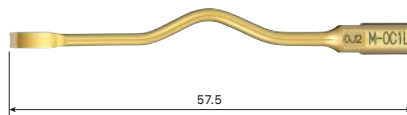

KOD PRODUKTU

Z305710

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Znaczniki w formie kropek 2 mm od wierzchołka
- Końcówka zagięta lewostronnie*
- Trzy ząbki; grubość 0.6 mm





SSRO gałęzi żuchwy
Wewnątrzustna pionowa osteotomia gałęzi żuchwy (IVRO)
Wyznaczenie punktu początkowego i kanałów prowadzących.

* Kierunek zagięcia zgodny z widokiem końcówki z przodu.

MODEL SG3

POZIOM MOCY **SURG** 80%

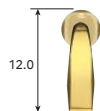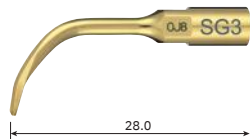

KOD PRODUKTU

Z305104

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Szpatułka zakończona trójkątnie
- Skrobak z pojedynczą krawędzią tnącą





Wygładzanie grzbietu
wyrostka zębodołowego

SG3

MODEL SG4

POZIOM MOCY **SURG** 80%

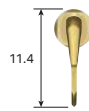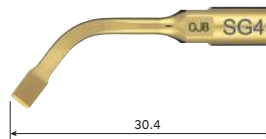



KOD PRODUKTU

Z305105

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Szpatułka zakończona ostrzem
- Skrobak z krawędzią dwustronnie tnącą

MODEL SG5

POZIOM MOCY **SURG** 80%

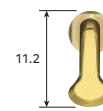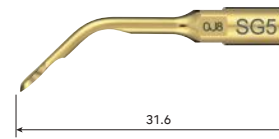

KOD PRODUKTU

Z305106

Do usuwania ziarniny zapalnej z obszaru ekstrakcji.

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Szpatułka o zaokrąglonym kształcie
- Skrobak z pojedynczą krawędzią tnącą



Osteoplastyka



SG5

Do syndesmotomii. Równie efektywne podczas ekstrakcji zębów ankylotycznych.

EKSTRAKCJA

MODEL **SG17**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

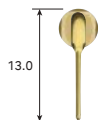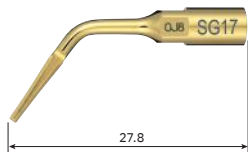



KOD PRODUKTU

Z305132

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Grubość 0.7 mm

MODEL **SG18R**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

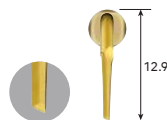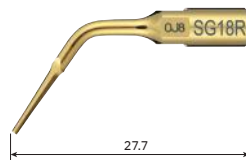



KOD PRODUKTU

Z305133

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Grubość 0.7 mm
- Zakończenie końcówki ścięte prawostronnie *

MODEL **SG18L**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

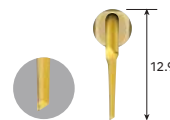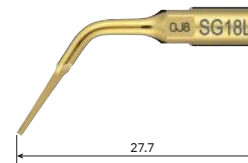

KOD PRODUKTU

Z305134

- Pokryta TiN - powłoką azotku tytanu
- Grubość 0.7 mm
- Zakończenie końcówki ścięte lewostronnie *




Ekstrakcja

SG17, SG18R, SG18L


* Kierunek zagięcia zgodny z widokiem końcówki z przodu.

PODNIESIENIE DNA ZATOKI (METODA ZAMKNIĘTA) Procedura wykonania.

Końcówki przeznaczone do podnoszenia dna zatoki zwiększają bezpieczeństwo zabiegu, ponieważ są mniej inwazyjne, a czas zabiegu krótszy. Osteotomia ultradźwiękowa zmniejsza ryzyko uszkodzenia błony Schneidera. Dodatkowo wyeliminowanie uderzeń osteotomu zmniejsza dyskomfort pacjenta oraz możliwość wystąpienia zawrotów głowy.

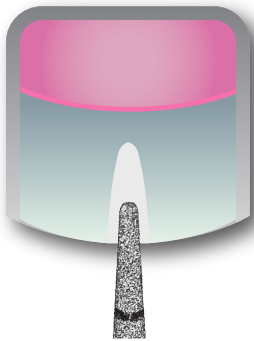

Wykonanie otworu
i nawiercenia pilotażowego

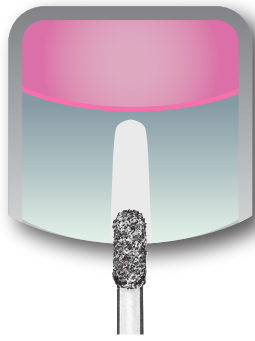


Preparacja kości pod tożę
implantu




Poszerzenie i formowanie
miejsca preparacji



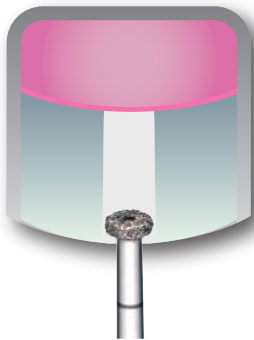

Formowanie kości na granicy
wyrostka zębodołowego
i zatoki szczękowej

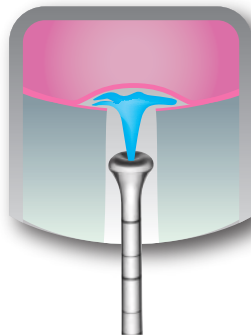

Uniesienie błony śluzowej
zatoki przez zastosowanie
irygacji wewnętrznej



Uformowanie miejsca na implant
po podniesieniu błony śluzowej
zatoki

PREPARACJA POD IMPLANTY

Do preparacji łoża implantu, nawiercenia pilotażowego oraz innych procedur.

MODEL **SG15A**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

MODEL **SG15B**


POZIOM MOCY **SURG** 50%



KOD PRODUKTU

Z305124

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki: $\varnothing$ 0.7 mm
- Znaczniki na wysokości 5 mm i 10 mm od wierzchołka

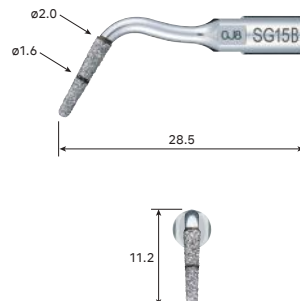

KOD PRODUKTU

Z305125

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki: $\varnothing$ 1.3 mm
- Znaczniki na wysokości 5 mm i 10 mm od wierzchołka



Preparacja pod implant
SG15A, SG15B




Do preparacji łoża implantu, wygładzania powierzchni kości oraz innych procedur. **PREPARACJA POD IMPLANTY**

MODEL **SG15C**

POZIOM MOCY **SURG** 50%


MODEL **SG15D**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

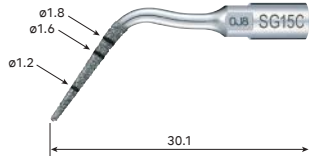

KOD PRODUKTU

Z305126

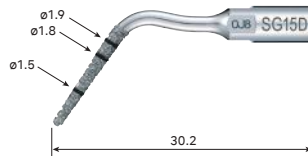

KOD PRODUKTU

Z305127

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki: $\varnothing$ 0.9 mm
- Znaczniki na wysokości 5 mm, 10 mm i 12 mm od wierzchołka

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki: $\varnothing$ 1.3 mm
- Znaczniki na wysokości 5 mm, 10 mm i 12 mm od wierzchołka



Preparacja pod implant
SG15C, SG15D



PREPARACJA POD IMPLANTY


Do poszerzania i formowania miejsca implantacji przy dojściu od grzbietu wyrostka zębodołowego.

MODEL **SG16A**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

MODEL **SG16B**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

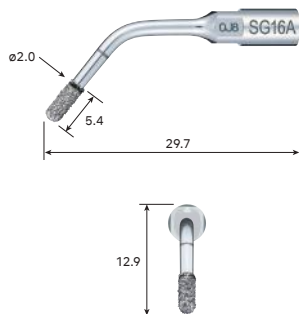


KOD PRODUKTU

Z305128

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki: $\varnothing$ 2.0 mm
- Znaczniki na wysokości 5 mm i 10 mm od wierzchołka



Preparacja pod implant
SG16A

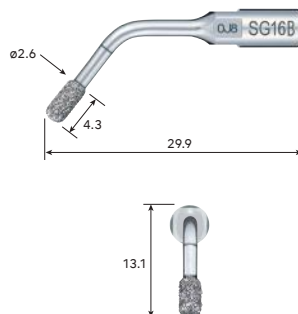

KOD PRODUKTU

Z305129

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki: $\varnothing$ 2.6 mm
- Znaczniki na wysokości 5 mm i 10 mm od wierzchołka



Preparacja pod implant
SG16B



Do poszerzania i formowania miejsca preparacji podczas dojścia od grzbietu
wyrostka zębodołowego.

PREPARACJA POD IMPLANTY


MODEL **SCL2D**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

MODEL **SCL4D**

POZIOM MOCY **SURG** 80%


IRYGACJA WEWNĘTRZNA

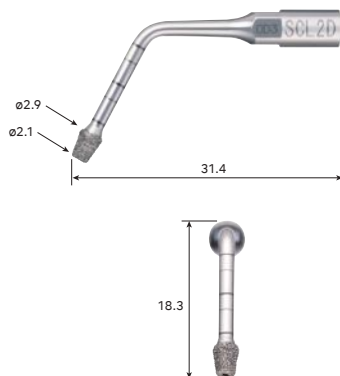

KOD PRODUKTU

Z305182

IRYGACJA WEWNĘTRZNA

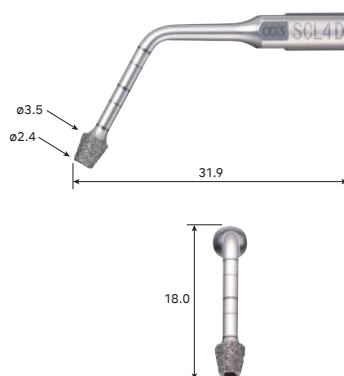


KOD PRODUKTU

Z305184

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

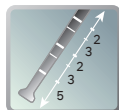

Głębokość preparacji
pod implant można ocenić
na podstawie znaczników
na końcówce.



Formowanie łoża implantu
SCL2D, SCL4D



PODNIESIENIE DŃA ZATOKI (METODA ZAMKNIĘTA)

Do zabiegów takich jak osteotomia, dojście do zatoki szczękowej od strony grzbietu wyrostka, dostosowanie łoża implantu.

MODEL **SCL1D**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

MODEL **SCL3D**

POZIOM MOCY **SURG** 80%

MODEL **SCL5D**

POZIOM MOCY **SURG** 80%


IRYGACJA WEWNĘTRZNA



KOD PRODUKTU

Z305171

IRYGACJA WEWNĘTRZNA

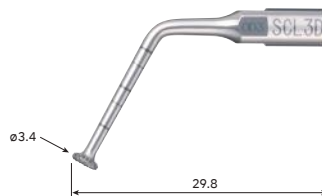

KOD PRODUKTU

Z305173

IRYGACJA WEWNĘTRZNA




KOD PRODUKTU

Z305175

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym

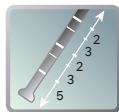

Głębokość preparacji pod implant można ocenić na podstawie znaczników na końcówce.



Wycięcie dna w miejscu preparacji łoża implantu.

SCL1D, SCL3D, SCL5D



Podniesienie błony zatoki przez zastosowanie
irygacji wewnętrznej.

PODNIESIENIE DNA ZATOKI *(METODA ZAMKNIĘTA)

MODEL **SCL1**

POZIOM MOCY **SURG** 50%


MODEL **SCL3**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

MODEL **SCL5**

POZIOM MOCY **SURG** 50%


IRYGACJA WEWNĘTRZNA

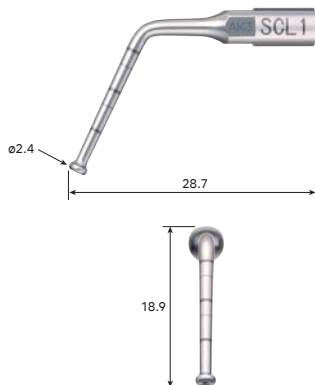

KOD PRODUKTU

Z305170


IRYGACJA WEWNĘTRZNA

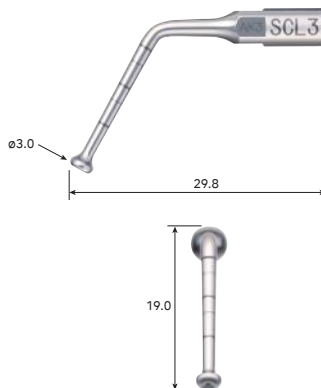

KOD PRODUKTU


Z305172

IRYGACJA WEWNĘTRZNA

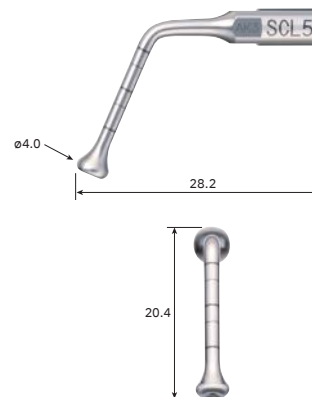

KOD PRODUKTU

Z305174

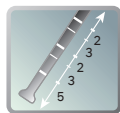

Głębokość preparacji
pod implant można ocenić
na podstawie znaczników
na końcówce



Przed podniesieniem błony śluzowej zatoki szczękowej

SCL1, SCL3, SCL5



*(DOSTĘP OD STRONY WYROSTKA ZĘBODOLÓWEGO)

PODNIESIENIE DNA ZATOKI (METODA ZAMKNIĘTA)

PODNIESIENIE ZATOKI

Do fenestracji i formowania kości.

MODEL **SG6D**

POZIOM MOCY **SURG** 80%



KOD PRODUKTU

Z305107

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym





Odsłonięcie zębów mądrości
i zębów zatrzymanych

SG6D

MODEL **SG7D**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

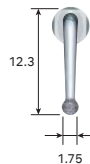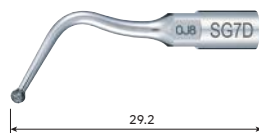

KOD PRODUKTU

Z305108

• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym





Augmentacja w bocznej
części szczęki

SG7D

Odwarstwienie i podniesienie błony zatoki szczękowej. **ODDZIELENIE BŁONY ŚLIZOWEJ ZATOKI**

MODEL **SG9**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

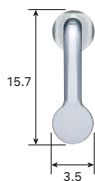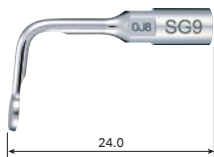

ORDER CODE

Z305110


- Płaski okrągły elewator
- Zagięty pod kątem 90°



Odwarstwienie błony śluzowej zatoki
SG9, SG10

MODEL **SG10**

POZIOM MOCY **SURG** 50%

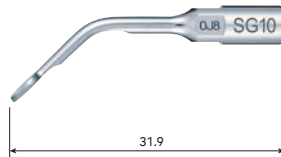



KOD PRODUKTU

Z305111

- Okrągły elewator o wypukłej powierzchni
- Zagięty pod kątem 135°

MODEL **SG11**


POZIOM MOCY **SURG** 50%

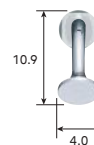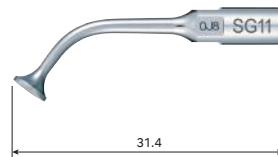

KOD PRODUKTU

Z305112

- Kompresor stożkowy

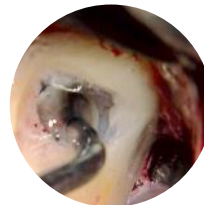

Podniesienie błony śluzowej
zatoki
SG11

MODEL **G1-S**

POZIOM MOCY **SURG** 50%



KOD PRODUKTU

Z305113





Zęby jedno i wielokorzeniowe

G1-S

MODEL **P20-S**

POZIOM MOCY **PERIO** 100%

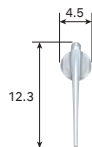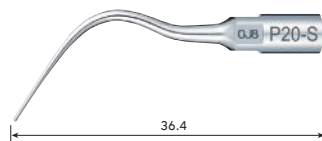

KOD PRODUKTU

Z305114




Zęby jedno i wielokorzeniowe
P20-S

MODEL **P25R-S**

POZIOM MOCY **PERIO** 100%

Usuwanie biofilmu z furkacji.

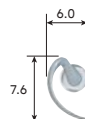

KOD PRODUKTU

Z305115

• Końcówka zagięta prawostronnie*




Zęby jedno i wielokorzeniowe
P25R-S, P25L-S

MODEL **P25L-S**

POZIOM MOCY **PERIO** 100%

Usuwanie biofilmu z furkacji.

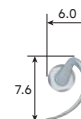

KOD PRODUKTU

Z305116

• Końcówka zagięta lewostronnie*

* Kierunek zagięcia zgodny z widokiem końcówki z przodu.


MODEL **V10-S**

POZIOM MOCY **PERIO** 100%

MODEL **V-P10**



Uchwyt do końcówek typu V.

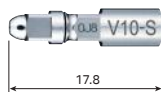


ORDER CODE

Z305117

- Zawiera klucz do wymiany końcówki E
- Plastikowa końcówka nie jest dołączona

Do konserwacji protez i implantów. Wykonane ze specjalnego materiału, aby umożliwić bezpieczne oczyszczenie nie powodując uszkodzenia metali i implantów.

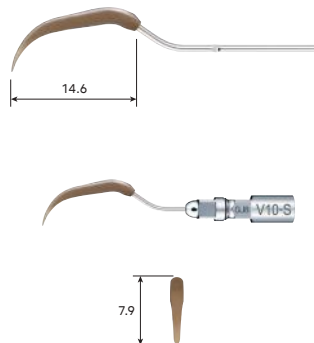

KOD PRODUKTU

Y900184

- Opakowanie zawiera 3 szt.
- Uchwyt V10-S nie jest dołączony



V-P10

MODEL **V-P11R**

Końcówki podwójnie zagięte. Zwiększona długość ułatwia osiągnięcie trudno dostępnych obszarów oraz zapobiega interferencjom z sąsiadującymi zębami.



KOD PRODUKTU

Y1002165

- Opakowanie zawiera 3 szt.
- Końcówka zagięta prawostronnie
- Uchwyt V10-S nie jest dołączony



V-P11R, V-P11L

MODEL **V-P11L**



KOD PRODUKTU

Y1002166

- Opakowanie zawiera 3 szt.
- Końcówka zagięta lewostronnie
- Uchwyt V10-S nie jest dołączony

MODEL **V-P12**

Wydłużona wersja popularnej końcówki V-P10.



KOD PRODUKTU

Y1002167

- Opakowanie zawiera 3 szt.
- Uchwyt V10-S nie jest dołączony





V-P12

MODEL **E30RD-S** POZIOM MOCY **ENDO** 50%

MODEL **E30LD-S** POZIOM MOCY **ENDO** 50%

MODEL **E31D-S** POZIOM MOCY **ENDO** 50%



MODEL **E32D-S** POZIOM MOCY **ENDO** 50%

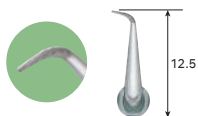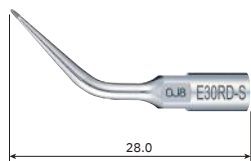

KOD PRODUKTU

Z305118



- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Do zębów tylnych (prawostronnie zagięta*)

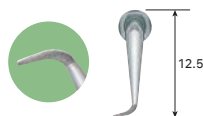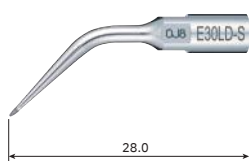

KOD PRODUKTU

Z305119



- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Do zębów tylnych (lewostronnie zagięta*)

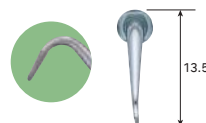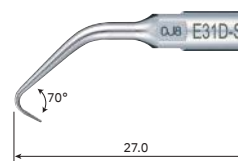

KOD PRODUKTU

Z305120


- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Do zębów przednich i tylnych (pod kątem 70°)

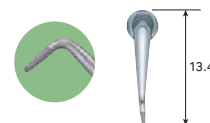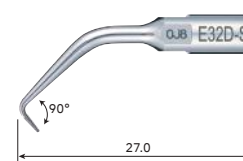

KOD PRODUKTU

Z305121

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Do zębów przednich (pod kątem 90°)

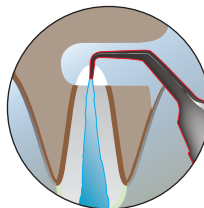

* Kierunek zagięcia zgodny z widokiem końcówki z przodu.

ZESTAWY KOŃCÓWEK

MODEL Zestaw podstawowy H-S

Zawiera:

- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 **CHIRURGIA KOSTNA** **PODNIESIENIE DŃA ZATOKI**
- Stojak na końcówki **SKROBAKI**

KOD PRODUKTU

Y1002775

MODEL Zestaw do cięcia kości

Zawiera:

- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D **CHIRURGIA KOSTNA**
- Stojak na końcówki

KOD PRODUKTU

Y900688

MODEL Zestaw do podnoszenia zatoki

Zawiera:

- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11 **PODNIESIENIE DŃA ZATOKI**
- Stojak na końcówki

KOD PRODUKTU

Y900689

MODEL Zestaw endodontyczny S

Zawiera:

- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S **ENDODONCJA**
- Stojak na końcówki

KOD PRODUKTU

Y900691

MODEL Zestaw do preparacji implantu

Zawiera:

- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B **PREPARACJA POD IMPLANTY**
- Stojak na końcówki

KOD PRODUKTU

Y900774

MODEL Zestaw do podnoszenia zatoki Do implantów w rozmiarze standardowym

Zawiera:

- SCL1D, SCL2D, SCL1 • VS Klucz do końcówek **PODNIESIENIE DŃA ZATOKI**
- Stojak na końcówki • Instrukcję użytkowania

KOD PRODUKTU

Y1002841

MODEL Zestaw do podnoszenia zatoki Do implantów w rozmiarze powiększonym

Zawiera:

- SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3 • VS Klucz do końcówek **PODNIESIENIE DŃA ZATOKI**
- Stojak na końcówki • Instrukcję użytkowania

KOD PRODUKTU

Y1002842



Wydany przez

makRomed
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

! www.makromed.com.pl !
! biuro@makromed.com.pl !
! +48 42 678 88 54 !
! ul. Czechosłowacka 1 !
! 92-216 Łódź !

Create it 