

Varios Combi Pro2



NSK





32

powody, aby kupić Varios Combi Pro2

Po wsłuchaniu się w potrzeby szerokiego grona profesjonalnych stomatologów, stworzyliśmy urządzenie, które dostarcza zaawansowanej funkcjonalności tak potrzebnej w klinikach.

Łącząc poddżiastową i naddżiastową terapię proszkową z leczeniem periodontycznym, przy pomocy skalingu ultradźwiękowego, Varios Combi Pro2 został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania, dostosowując się do preferowanego stylu leczenia.

Zrodzony w NSK z ogromnego doświadczenia oraz przeprowadzonych badań, Varios Combi Pro2 dostarcza profesjonalną opiekę, jakiej oczekuje się od firmy NSK. Dzięki trwałości i łatwej konserwacji, jest doskonały do codziennych rutynowych zabiegów stomatologicznych. Sprawia, że przebiegają one płynnie i wydajnie – bez zakłóceń.

Z NSK u boku, masz narzędzia, które pozwolą Ci wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafisz - zapewniając płynną, skuteczną opiekę, od profilaktyki po leczenie dla każdego pacjenta, za każdym razem.

SKALER ULTRADŹWIĘKOWY

Łatwo wysuwana butelka na wodę

Dla Twojego komfortu i wygody, butelkę na wodę można łatwo odłączyć i ponownie zamontować.



Tytanowa smukła rękojeść skalera

Pierwsza na świecie ultradźwiękowa rękojeść skalera wykonana z czystego tytanu. Unikalne wykończenie DURAGRIP zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność użytkowania, a światło LED zapewnia doskonałą widoczność.



Regulowana objętość wody

Nasze analogowe pokrętko zapewnia precyzyjną i intuicyjną kontrolę strumienia wody.

Piaskarka i skaler posiadają osobne pokrętki.



Podgrzewanie wody

Zarówno skaler ultradźwiękowy, jak i piaskarka korzystają z podgrzanej wody, zapewniając większy komfort pacjenta.

DAŻĄC DO UŻ

TERAPIA PROSZKOWA



Oddzielny unit i zbiornik

Nasz zbiornik na proszek został zaprojektowany tak, aby był oddzielony od jednostki. Jest zbudowany z myślą o trwałości i łatwości w utrzymaniu - dla płynnego i nieprzerwanego działania w codziennej praktyce klinicznej.



Dysza strumieniowa do końcówek Perio

Dysza strumieniowa do końcówek Perio pomaga wykonać precyzyjne, ukierunkowane leczenie - zarówno poddziąsłowe, jak i naddziąsłowe.



Rękojeść do proszku z wąską dyszą

Nasza smukła dysza umożliwia wygodną pracę w trudno dostępnych miejscach.



Inteligentny panel sterowania

Wyposażony w nasz uniwersalny inteligentny panel wyświetlania, pokazuje tylko zintegrowane przyciski istotne dla bieżącej procedury - umożliwiając skupienie się na leczeniu i łatwą obsługę.

YTECZNOŚCI



SKALER ULTRADŹWIĘKOWY

Skaler ultradźwiękowy

Stworzony z myślą o trwałości. Wygodny w użyciu.

W NSK nie uznajemy kompromisów w kwestii jakości. Nasz skaler ultradźwiękowy zapewnia łatwość obsługi, komfort, trwałość, wygodę, dostęp i widoczność.

Nasz Varios Combi Pro2 jest wyposażony w naszą pierwszą na świecie ultradźwiękową rękojeść skalera wykonaną z czystego tytanu: odporną na ciepło i chemikalia oraz przystosowaną do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie.

Ponadto, aby zapewnić doskonałą przyczepność i stabilność, nasza rękojeść skalera jest wykończona wysoko cenioną powłoką **DURAGRIP**, stosowaną w serii rękojeści premium NSK.

Ten elegancki, trwały, dobrze wyważony i lekki skaler jest wygodny w użyciu i zapewnia długotrwałą wydajność.





TERAPIA PROSZKOWA

Terapia proszkowa

Smukłe, wymienne dysze.


Nasze końcówki i dysze do proszków zostały zaprojektowane tak, aby uczynić Twoją pracę łatwiejszą i bardziej wydajną:

- Długie, wąskie końcówki ułatwiają dostęp do zębów trzonowych.
- Dzięki smukłym końcówkom i dyszom zapewnisz sobie doskonałą widoczność i swobodę manewrowania w jamie ustnej.
- Możliwe jest zapewnienie szerokiego pola operacyjnego po stronie językowej bez konieczności otwierania ust szerzej.
- Dysze można samodzielnie wymienić w trakcie pracy, co ułatwia ich użytkowanie.



Dysza strumieniowa do rękocyf Perio (opcja)

W odpowiedzi na zapotrzebowanie lekarzy, opracowaliśmy dyszę Jet Nozzle do rękocyf Perio - do stosowania w leczeniu naddziąstowym. Oprócz poprzedniej dyszy Perio, teraz możliwe jest precyzyjne ukierunkowanie na odpowiedni obszar za pomocą dyszy Jet Nozzle. Te dwa typy dysz perio można stosować zamiennie w zależności od pożądanego zastosowania.

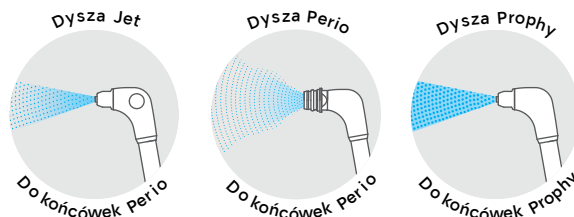


Stała dostępność



Niezależna jednostka i komory

W przypadku Varios Combi Pro2 wszystkie linie prowadzące proszek (komora proszkowa, wąż i końcówki) są oddzielone od jednostki głównej. W mało prawdopodobnym przypadku zatkania proszkiem, części można łatwo odłączyć ręcznie. Zasadniczo nie ma potrzeby demontażu ani wysyłania całego urządzenia do dostawcy lub producenta w celu naprawy lub wymiany części. Twoja praktyka może zatem działać i generować dochód - bez przerw.

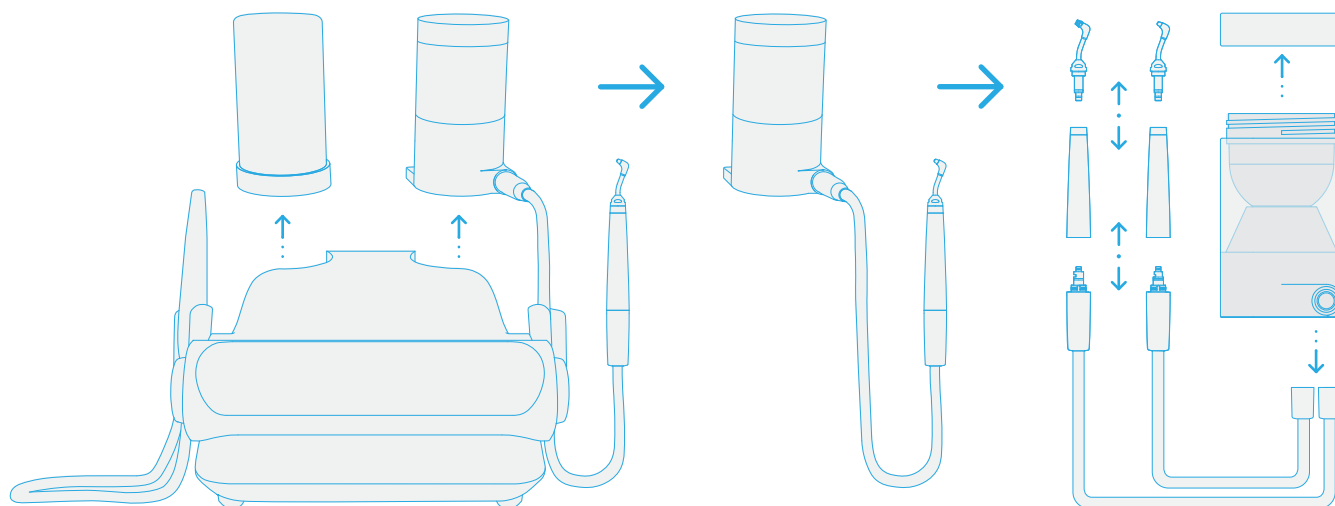

Wnętrze jednostki głównej zaprojektowano w oparciu o inteligentną koncepcję zawierającą wyłącznie obieg powietrza i wody.



Nie wymaga rutynowego serwisowania

Ponieważ Varios Combi Pro2 zaprojektowano tak, aby łatwo o niego dbać, regularna konserwacja przez lokalnego dostawcę usług NSK nie jest wymagana. Przestoje w pracy spowodowane konserwacją należą zatem do przeszłości. W razie potrzeby nasz przyjazny zespół wsparcia jest zawsze dostępny.

Łatwa pielęgnacja

Automatyczne czyszczenie



Urządzenie Varios Combi Pro2 ma cztery tryby automatycznego czyszczenia, które można uruchomić (w razie potrzeby) po każdym pacjencie lub pod koniec dnia.

Dzięki temu unika się konieczności czyszczenia wielu narzędzi, jednocześnie zmniejszając ryzyko zatkania proszkiem i gromadzenia się wody. Ponadto utrzymują wewnątrz urządzenia w czystości przez cały czas.



Automatyczne czyszczenie obiegu piasku



Automatyczne czyszczenie obiegu wody



Automatyczne czyszczenie skalera ultradźwiękowego



Automatyczne czyszczenie całego urządzenia



Tryb CLM



Czyszczenie obiegu wody wewnątrz urządzenia jest proste, dzięki naszemu rozwiązaniu b.clean i ustawieniu trybu CLM, dzięki czemu Varios Combi Pro2 jest zgodny z europejskimi wymogami dotyczącymi ponownego przetwarzania. Jako dodatkowo wbudowany mechanizm bezpieczeństwa urządzenie jest zaprogramowane tak, aby wyłączyć możliwość pracy, dopóki roztwór chemiczny nie zostanie całkowicie opróżniony.

Komfort pacjenta

System podgrzewania wody




Varios Combi Pro2 jest wyposażony w podgrzewacz obiegu wody zarówno dla skalera ultradźwiękowego, jak i piaskarki. Temperatura wstrzykiwanej wody jest podobna do temperatury w jamie ustnej, co zapewnia większy komfort pacjentom, nawet tym z nadwrażliwością.

Operatywność

Bezprzewodowy wielofunkcyjny sterownik nożny

Umieść sterownik nożny w miejscu, które jest dla Ciebie najbardziej optymalne, nie martwiąc się o ograniczenia związane z długością przewodów lub kabli.

Sterownik nożny Varios Combi Pro2 łączy się przez Bluetooth® i umożliwia bezproblemową i wygodną obsługę dzięki wielofunkcyjnym opcjom sterowania – dzięki czemu możesz w pełni skupić się na wykonywanym zabiegu.

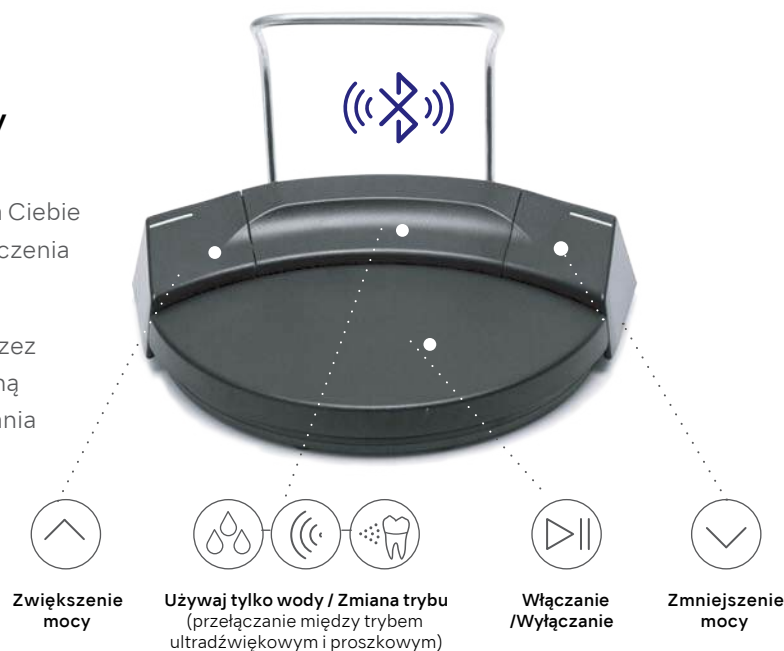

iCart Prophecy2 z butelką na wodę*

Nasz specjalistyczny wózek wnosi nowy wymiar łatwości użytkowania i wygody.


Urządzenie można wyposażać w niezależny system zaopatrzenia w wodę; dzięki temu połączenie Varios Combi Pro2 z iCart Prophecy2 umożliwia leczenie pacjentów w miejscach, w których dostępność wody z zewnątrz oraz jej jakość, mogą stanowić problem.



* Zestaw z butelką na wodę jest opcjonalny

Szerokie portfolio końcówek skalera ultradźwiękowego

Nasza zróżnicowana oferta, obejmująca ponad 70 rodzajów końcówek do skalera ultradźwiękowego, oznacza to, że skaler ultradźwiękowy nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań klinicznych, zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu schorzeń stomatologicznych.

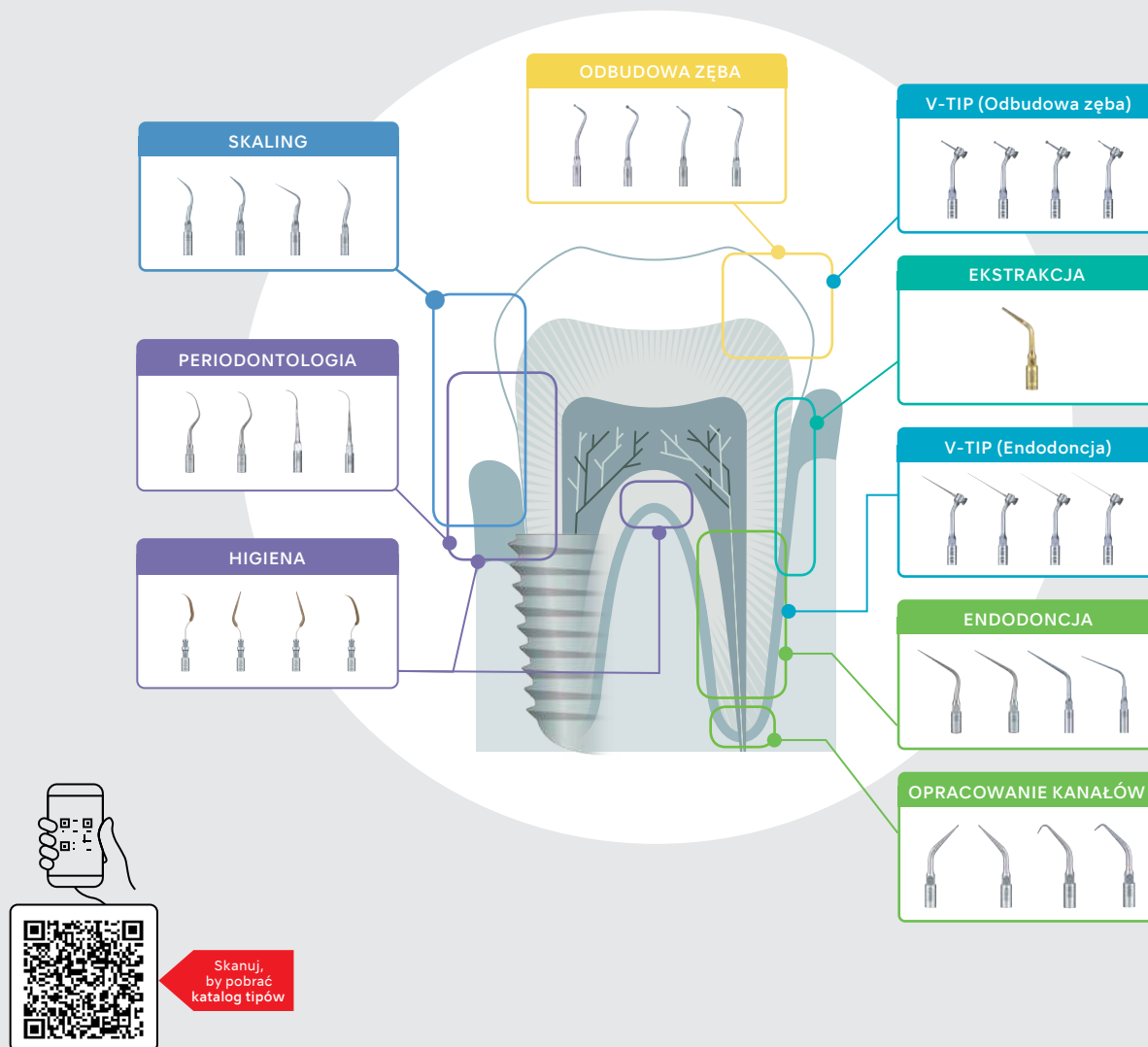



PROSZKI

Proszki

Utrzymanie zdrowego i pięknego uśmiechu

Terapia proszkowa skutecznie eliminuje kamień, przebarwienia oraz biofilm naddziąstkowy i poddziąstkowy. Wykorzystując zalety i protokoły Varios Combi Pro2, możesz otworzyć nową erę profesjonalnej opieki, zapewniając wyjątkowe rezultaty. Beztroska dla Ciebie i pełne zadowolenie dla Twoich pacjentów.

FLASH pearl

Proszek polerujący do stosowania naddziąstkowego, zawierający kuliste cząsteczki, które są delikatne dla powierzchni zębów.

Przeznaczenie: usuwanie uporczywych plam

Główny składnik: Węglan wapnia

- nie zawiera chlorku sodu (brak słonego smaku)
- odpowiedni dla pacjentów na diecie niskosodowej

Średnia wielkość cząstek: **54µm**



MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
FLASH Pearl 4 x butelka 300g	Y900698

SOFT pearl

Proszek polerujący do stosowania naddziąstkowego o niskiej inwazyjności. Nadaje się do użycia w zabiegach protetycznych.

Przeznaczenie: usuwanie biofilmu i umiarkowanych plam

Główny składnik: Glicyna

- bez dodatków zapachowych
- słodki posmak
- wysoce rozpuszczalny, nie kumuluje się przy użytkowaniu poddziąstkowym

Średnia wielkość cząstek: **65µm**



MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
SOFT Pearl 4 x butelka 250g	Y1500721

Perio Mate Powder


Proszek polerujący do stosowania na brzegu dziąstkowym i poddziąstkowo

Przeznaczenie: usuwanie biofilmu i drobnych plam

Główny składnik: Glicyna

- bez dodatków zapachowych
- słodki posmak
- wysoce rozpuszczalny, nie kumuluje się przy użytkowaniu poddziąstkowym






Średnia wielkość cząstek: **25µm**

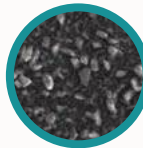

MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
Perio Mate Powder 2 x butelka 160g	Y900938

Terapia proszkowa

Połączenia i zastosowania proszku i dyszy

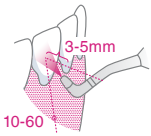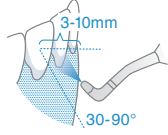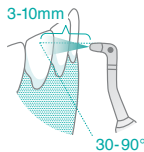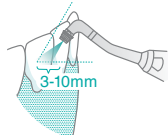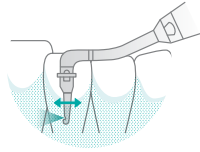TRYB	RODZAJ PROSZKU	RĘKOJEŚĆ	DYSZA	SPOSÓB UŻYCIA	PROSZEK
TRYB PROPHY 	DLA PROPHY 				
					
TRYB PERIO 	DLA PERIO 				
					
					


MIT

Terapia małoinwazyjna

Przy użyciu Varios Combi Pro2 można przeprowadzić terapię małoinwazyjną, nazywaną przez NSK „MIT”.

Pomaga Tobie, bohaterowi higieny jamy ustnej, stać się lepszą wersją samego siebie.

Ukończ krok 1, krok 2 oraz krok 4 protokołu MIT, przy pomocy ultradźwiękowego skalera oraz zabiegu piaskarką dla leczenia naddziąsłowego oraz poddziąsłowego.

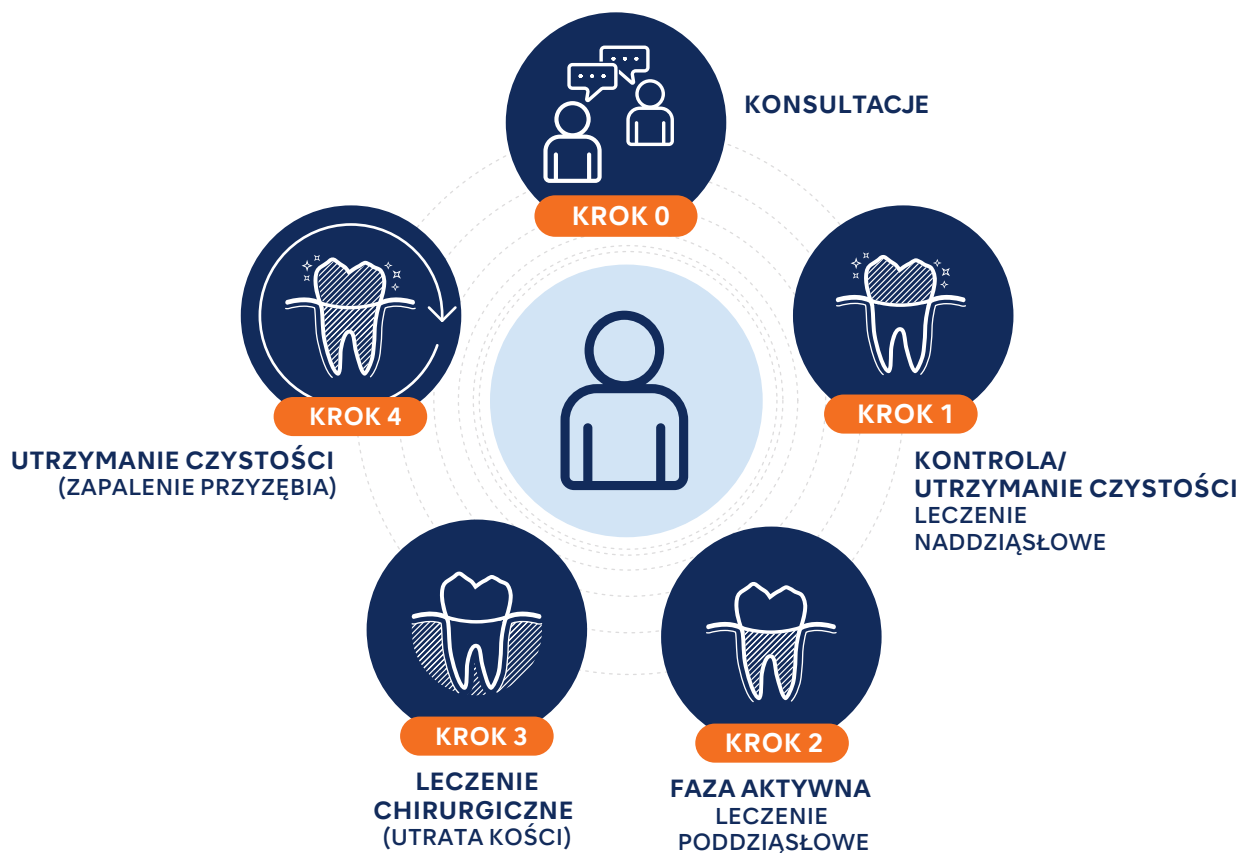

Firma NSK zobowiązuje się do najwyższej jakości intuicyjnych urządzeń do higieny jamy ustnej codziennego użytku

ŹRÓDŁA I REFERENCJE

Herrera, David, Mariano Sanz, Moritz Kebschull, et al. 2022. "Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline." Journal of Clinical Periodontology 49 Suppl 24 (S24)

Varios Combi Pro2

Zestaw podstawowy



OPTIC	MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
●	Varios Combi Pro2 Zestaw podstawowy	Y1500505

- Zestaw zawiera:**
 - Jednostka sterująca Varios Combi Pro2
 - VA2-LUX-HP Ti
 - VA2-LUX-SC Ti
 - Pojemnik Prophyl
 - Rękaw Prophyl
 - Rękojeść (Prophyl)
 - Bezprzewodowy sterownik nożny
 - Wieszak
 - Przewód powietrzny
 - Przewód wodny
 - Zestaw butli do irygacji
 - Zestaw butli do CLM
- Specyfikacja:**
 - Wymiary: Szer. 249 x Gł. 290 x Wys. 115 mm (wliczając pojemniki)
 - Waga: 3.5 kg
 - Zasilanie: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
 - Częstotliwość pracy (skalier): 28 - 32 kHz
 - Maksymalna moc pracy (skalier): 11 W

Opcja



MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
Zestaw Prophyl 2	Y1500469

- Zawiera:**
- Pojemnik Prophyl 2
 - Rękaw Prophyl 2
 - Rękojeść (Prophyl)
 - Proszek FLASH pearl (butelka 300g)
- * Zawarte w zestawie podstawowym Varios Combi Pro2



MODEL	KOD ZAMÓWIENIA
Zestaw Perio 2	Y1500470

- Zawiera:**
- Pojemnik Perio 2
 - Rękaw Perio 2
 - Rękojeść (Perio)
 - Końcówka dyszy Perio 40pc
 - Narzędzie do usuwania końcówki dyszy Perio Mate
 - Proszek Perio Mate (butelka 160g)

Dodatkowe elementy wyposażenia

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
iCart Prophy2 - wózek Wymiary: Wys. 840 mm Waga: 16 kg		S9098

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
VA2-LUX-HP Ti		EA1203X050

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Środek B.clean (1L x 6 butelek)		BCL600

Części zamienne

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Dysza (Prophy)		T1074012

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Zestaw butli do irygacji (for Water Bottle kit)		ZA16160001

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Zestaw butli na wodę Zestaw zawiera: • Zestaw butli do irygacji • Zestaw butli CLM • Narzędzie do czyszczenia		Y1500719

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Rękojeść (Prophy)		T1074001

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Dysza (Perio)		T1077012

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Zestaw butli CLM (for Water Bottle Kit)		ZA16240001

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Moduł CLM - zestaw Zestaw zawiera: • Mocowanie do Perio CLM • Mocowanie do Prophy CLM		Y1500740

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Rękojeść (Perio)		T1077001

MODEL	PRODUKT	KOD ZAMÓWIENIA
Dysza strumieniowa (Perio)		TA10770106



Create it 

www.nsk.info.pl

makRomed

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

| www.makromed.com.pl |
| biuro@makromed.com.pl |
| +48 42 678 88 54 |
| ul. Czechosłowacka 1 |
| 92-216 Łódź, PL |